

IRIGASTON®

NUEVO



SOLUCIÓN

para el alivio de las fosas nasales

 **Aflofarm**



SOLUCIÓN para el lavado nasal y sinusal

Permite el preparado de **soluciones tanto isotónicas como hipertónicas** según las necesidades del paciente.



Solución isotónica

Limpia las secreciones residuales, bacterias, virus y alérgenos.



Secreciones
Residuales



Bacterias
y/o virus



Alérgenos

Y proporciona cuidados para la nariz y los senos paranasales, en caso de:



Rinitis



Sinusitis
aguda
o crónica



Procedimientos
quirúrgicos



Para mantener
una adecuada higiene
nasal y sinusal



Tiene efecto
hidratante sobre
la mucosa nasal



Solución hipertónica

Además de sus propiedades limpiadoras tiene propiedades osmóticas gracias a las cuales reduce la inflamación de la mucosa:

- Recomendado en inflamación nasal que acompaña a la rinitis de infecciones y alergias
- Indicado para la sinusitis



Puede ser utilizado
por mujeres embarazadas
y durante la lactancia



Indicado en adultos
y niños mayores
de 4 años



Cómo utilizar IRIGASTON®

Los lavados nasales y sinusales deben realizarse de **1 a 2 veces al día**.



- Para preparar la solución isotónica, vierta 1 sobre de polvo en la botella y luego llénela hasta la línea marcada (240 ml) con agua hervida y enfriada.
- Para preparar la solución hipertónica, vierta 2 sobres de polvo en la botella y luego llénela hasta la línea marcada (240 ml) con agua hervida y enfriada.
- Prepare una solución nueva para cada lavado.

1.



Prepare la solución de lavado: vierta el contenido de 1 o 2 sobres de polvo en la botella adjunta y luego llénela hasta la línea marcada (240 ml) con agua hervida y enfriada.

2.




Tape bien la botella, cubra la abertura del tapón con el dedo y agite hasta que la sustancia se disuelva por completo.

3.



Póngase en una posición ligeramente reclinada sobre el fregadero. Respire libremente. Coloque la punta de la botella contra una de sus fosas nasales.

4.

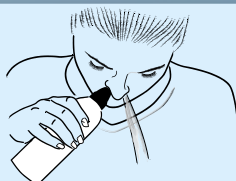

Presione la botella con un movimiento suave para que la solución entre en su nariz. Respire con calma y la solución saldrá por la otra fosa nasal. No trague la solución si le llega a la garganta. Repita lo mismo en la otra fosa nasal.

5.



Después del lavado, suénese la nariz suavemente.

6.



Deseche la solución no utilizada y lave y seque bien la botella y la tapa.

Advertencias especiales y precauciones recomendadas:

No usar en caso de hipersensibilidad al cloruro de sodio. Si los síntomas que acompañan a la rinitis o la sinusitis empeoran, consulte a un médico. No lo use si la nariz está completamente bloqueada, evitando que la solución se escape. No lo use si tiene una infección o una sensación de taponamiento en los oídos. Si ha tenido una cirugía de oídos, consulte a su médico antes de usar el producto. Una vez finalizada la irrigación, puede producirse una ligera fuga de solución residual de la nariz al inclinarse. No lo use más tarde de una hora antes de acostarse. No se recueste durante una hora inmediatamente después de la irrigación para evitar que la solución residual entre en el oído. Los niños pueden usar el producto solo bajo la supervisión de un adulto. El uso en niños menores de 4 años debe consultarse con un médico.





Rinitis en el curso
de una infección o alergia



Exposición a
altas concentraciones
de polvo en el aire



Sinusitis tanto aguda
como crónica



Para mantener
una adecuada higiene
nasal y sinusal



Antes y después de una
cirugía nasal y de los
senos paranasales



Tiene efecto hidratante
sobre la mucosa nasal

Presentaciones disponibles del producto sanitario:

Set de lavado nasal y sinusal

12 sobres de polvo para preparar una solución de lavado nasal y sinusal. Irrigador en forma de botella flexible (240 ml) con un aplicador ergonómico para una aplicación cómoda y eficaz de la solución en la nariz.



1 irrigador + 12 sobres
CN 219802.9

Estuche de recarga

30 sobres de polvo para preparar la solución de lavado nasal y sinusal.



30 sobres
CN 219803.6

Referencia: Instrucciones de uso Irigaston

Material dirigido a profesional sanitario